












Legende der gebräuchlichen Symbole

auf der Verpackung und Kennzeichnung von
Medizinprodukten von DeRoyal



Seite 1

| Symbol | Erklärung | Normbezeichnung | Normtitel |
|---|--|--------------------------|--|
|  | Gibt die Katalognummer des Herstellers an, damit das Medizinprodukt identifiziert werden kann. | ISO 15223-1, Punkt 5.1.6 | Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten. Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen. |
| Katalog- bzw. Modellnummer | | ISO 7000-2493 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
|  | Gibt die Chargennummer des Herstellers an, damit eine bestimmte Charge identifiziert werden kann. | ISO 15223-1, Punkt 5.1.5 | Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten. Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen. |
| Chargennummer | | ISO 7000-2492 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
|  | Gibt die Seriennummer des Herstellers an, damit ein bestimmtes Medizinprodukt identifiziert werden kann. | ISO 15223-1, Punkt 5.1.7 | Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten. Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen. |
| Seriennummer | | ISO 7000-2498 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
|  | Verweist auf ein Medizinprodukt, das vor Nässe geschützt werden muss. | ISO 15223-1, Punkt 5.3.4 | Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten. Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen. |
| Vor Nässe schützen | | ISO 7000-0626 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
|  | Verweist auf ein Medizinprodukt, das vor Lichtquellen geschützt werden. | ISO 15223-1, Punkt 53.2 | Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten. Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen. |
| Vor Sonnenlicht schützen | | ISO 7000-0624 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
|  | Gibt den Hersteller des Medizinproduktes an. | ISO 15223-1, Punkt 5.1.1 | Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten. Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen. |
| Hersteller | | ISO 7000-3082 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
|  | Gibt das Datum an, an dem das Medizinprodukt hergestellt wurde. | ISO 15223-1, Punkt 5.1.3 | Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten. Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen. |
| Herstellungsdatum | | ISO 7000-2497 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
|  | Bezeichnet die Stelle, die das Medizinprodukt in dem betreffenden Gebiet vertreibt. | ISO 15223-1, Punkt 5.1.9 | Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten. Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen. |
| Vertrieb | | ISO 7000-3724 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
|  | Gibt die Organisation an, die das Gerät in die Region importiert. | ISO 15223-1, Punkt 5.1.8 | Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten. Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen. |
| EU Importeur | | ISO 7000-3725 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
| Rx Only | Abgabe nur an Ärzte in den USA. | 21 CFR 801.15(c)(1)(i)F | Kennzeichnung - Medizinprodukte; Hervorhebung der erforderlichen Hinweise auf der Kennzeichnung. |
| Verschreibungspflichtig | | 21 CFR 801.109 | Kennzeichnung - Verschreibungspflichtige Produkte. |



Legende der gebräuchlichen Symbole

auf der Verpackung und Kennzeichnung von
Medizinprodukten von DeRoyal



| Symbol | Erklärung | Normbezeichnung | Normtitel |
|--|--|--|---|
| | Verweist auf ein Medizinprodukt, das nicht verwendet werden sollte, wenn die Verpackung beschädigt oder geöffnet wurde. | ISO 15223-1, Punkt 5.2.8 | Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen. |
| Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden | | ISO 7000-2606 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
| | Weist auf ein Medizinprodukt hin, das bei unsachgemäßer Handhabung zerbrechen oder beschädigt werden kann. | ISO 7000-0621, 2014-06-04 | Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen. |
| Zerbrechlich, vorsichtig handhaben | | | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
| | Zeigt ein medizinisches Gerät an, das eine Batterie enthält. | IEC 60417-5001B | Symbole zur Kennzeichnung von Produkten. |
| Batterie | | | |
| | Gibt das Datum an, nach dem das Medizinprodukt nicht mehr verwendet werden darf. | ISO 15223-1, Punkt 5.1.4 | Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten. |
| Verwendbar bis | | ISO 7000-2607 | Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen. |
| | Verweist darauf, dass Naturkautschuk oder trockener Naturkautschuklatex als Werkstoff im Medizinprodukt oder der Verpackung eines Medizinproduktes enthalten sind. | ISO 15223-1, Punkt 5.4.5 | Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten. |
| Enthält Naturkautschuk Latex | | | Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen. |
| | Weist darauf hin, dass die für das Gerät oder dessen Verpackung verwendeten Materialien keinen Naturkautschuk oder trockenen Naturkautschuk enthalten. | ISO 15223-1, Punkt 5.4.5, siehe Anhang B für das Negationssymbol | Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten. |
| Enthält keinen Naturkautschuk | | | Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen. |
| | Gibt das Datum an, nach dem das Medizinprodukt nicht mehr verwendet werden darf. | ISO 15223-1, Punkt 5.1.4 | Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten. |
| Verwendbar bis | | ISO 7000-2607 | Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen. |
| | Weist darauf hin, dass der Benutzer die Gebrauchsanweisung beachten muss. | ISO 15223-1, Punkt 5.4.3 | Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten. |
| Gebrauchsanweisung lesen | | IEC 60601-1, Tabelle D.1, Symbol 11 | Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen. |
| | | ISO 7000-1641 | Medizinische elektrische Geräte – Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale. |
| | | | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |



Legende der gebräuchlichen Symbole

auf der Verpackung und Kennzeichnung von
Medizinprodukten von DeRoyal



| Symbol | Erklärung | Normbezeichnung | Normtitel |
|--|---|---|--|
| | Weist darauf hin, dass der Benutzer die Gebrauchsanweisung für wichtige Sicherheitshinweise wie Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen, die aus verschiedenen Gründen nicht auf dem Medizinprodukt selbst dargestellt werden können, beachten muss. | ISO 15223-1, Punkt 5.4.4 | Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten. |
| Vorsicht | | IEC 60601-1, Tabelle D.1, Symbol 10 | Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen. |
| | Verweist auf ein Produkt, das für den einmaligen Gebrauch oder den Gebrauch an einem einzelnen Patienten während einer einzelnen Behandlung vorgesehen ist. HINWEIS: Synonyme für „Nicht wiederverwenden“ sind „Einmalgebrauch“ und „Nur einmal verwenden“. | ISO 15223-1, Punkt 5.4.2 | Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten. |
| Nicht wiederverwenden | | ISO 7000-1051 | Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen. |
| | Siehe Gebrauchsanweisung/ Packungsbeilage. | IEC 60601-1, Tabelle D.2, Symbol 10 | Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten. |
| Gebrauchsanweisung befolgen | | | Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen. |
| | Kennzeichnet die europäische technische Konformität. | 765/2008/EG 768/2008/EG Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte Artikel 4, 11, 12, 17, Anhang II) | Medizinische elektrische Geräte – Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale. |
| CE-Kennzeichnung | | | Die Anforderungen an die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen von Produkten; Medizinprodukte-Richtlinie. |
| | Kennzeichnet die technische Konformität mit den Vorgaben im Vereinigten Königreich (UK). | Verordnung 765/2008 | Die Anforderungen an die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen von Produkten. |
| UKCA-Kennzeichnung | | | |
| | Gibt den Bevollmächtigten in der Europäischen Gemeinschaft an. | ISO 15223-1, Punkt 5.1.2 | Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten. |
| EU-Bevollmächtigter | | | Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen. |
| | Gibt die Temperaturgrenzwerte an, denen das Medizinprodukt sicher ausgesetzt werden kann. | ISO 15223-1, Punkt 5.3.7 | Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten. |
| Lagertemperaturbereich | | ISO 7000-0632 | Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen. |
| | Gibt den unteren Temperaturgrenzwert an, dem das Medizinprodukt sicher ausgesetzt werden kann. | ISO 15223-1, Punkt 5.3.5 | Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten. |
| Unterer Grenzwert der Lagertemperatur | | ISO 7000-0534 | Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen. |
| | Gibt den oberen Temperaturgrenzwert an, dem das Medizinprodukt sicher ausgesetzt werden kann. | ISO 15223-1, Punkt 5.3.6 | Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten. |
| Oberer Grenzwert der Lagertemperatur | | ISO 7000-0533 | Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen. |



Legende der gebräuchlichen Symbole

auf der Verpackung und Kennzeichnung von
Medizinprodukten von DeRoyal






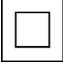



| Symbol | Erklärung | Normbezeichnung | Normtitel |
|--|--|---------------------------|---|
| | Geben den Luftfeuchtigkeitsbereich an, dem das Medizinprodukt sicher ausgesetzt werden kann. | ISO 15223-1, Punkt 5.3.8 | Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten. |
| Grenzwerte für Luftfeuchtigkeit | | ISO 7000-2620 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
| | Gibt den zulässigen Höchst- und Mindestwert des Luftdrucks für Transport und Lagerung an. | ISO 15223-1, Clause 5.3.9 | Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen — Teil 1: Allgemeine Festlegungen. |
| Luftdruck | | ISO 7000-2621 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
| | Verweist auf ein Medizinprodukt, das nicht resterilisiert werden darf. | ISO 15223-1, Punkt 5.2.6 | Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen — Teil 1: Allgemeine Festlegungen. |
| Nicht resterilisieren | | ISO 7000-2608 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
| | Verweist auf ein Medizinprodukt, das keinem Sterilisationsverfahren unterzogen wurde. | ISO 15223-1, Punkt 5.2.7 | Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen — Teil 1: Allgemeine Festlegungen. |
| Nicht steril | | ISO 7000-2609 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
| | Verweist auf ein Medizinprodukt, das einem Sterilisationsverfahren unterzogen wurde. | ISO 15223-1, Punkt 5.2.1 | Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen — Teil 1: Allgemeine Festlegungen. |
| Produkt, das einem Sterilisationsverfahren unterzogen wurde | | ISO 7000-2499 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
| | Verweist auf ein Medizinprodukt, das durch Bestrahlung sterilisiert wurde. | ISO 15223-1, Punkt 5.2.4 | Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen — Teil 1: Allgemeine Festlegungen. |
| Sterilisation durch Bestrahlung | | ISO 7000-2502 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
| | Verweist auf ein Medizinprodukt, das mit aseptischen Prozessen sterilisiert wurde. | ISO 15223-1, Punkt 5.2.2 | Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen — Teil 1: Allgemeine Festlegungen. |
| Sterilisation durch aseptische Prozesse | | ISO 7000-2500 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
| | Verweist auf ein Medizinprodukt, das mit Ethylenoxid sterilisiert wurde. | ISO 15223-1, Punkt 5.2.3 | Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen — Teil 1: Allgemeine Festlegungen. |
| Sterilisation mit Ethylenoxid | | ISO 7000-2501 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |



Legende der gebräuchlichen Symbole

auf der Verpackung und Kennzeichnung von
Medizinprodukten von DeRoyal



| Symbol | Erklärung | Normbezeichnung | Normtitel |
|---|--|--------------------------|--|
|  | Verweist auf ein Medizinprodukt, das mittels Dampf oder Trockenhitze sterilisiert wurde. | ISO 15223-1, Punkt 5.2.5 | Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen — Teil 1: Allgemeine Festlegungen. |
| Sterilisation mit Dampf oder Trockenhitze | | ISO 7000-2503 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
|  | Verweist darauf, dass mögliche biologische Gefahren bei einem Medizinprodukt bestehen. | ISO 15223 5.4.1 | Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen — Teil 1: Allgemeine Festlegungen. |
| Biogefährdung | | ISO 7000-0659 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
|  | Jede Klemme, die für den Anschluss an einen externen Leiter zum Schutz gegen elektrischen Schlag im Falle eines Fehlers oder einer Störung vorgesehen ist, oder die Klemme eines Schutzleiters (Erdung). | IEC 60417-5019 | Dient zur Kennzeichnung der Klemme für den Schutzerdungsleiter von Geräten der Klasse I. |
| Schutzerdung | | | |
|  | Doppelt isoliertes Gerät | IEC 60417-5172 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
| Doppelt isoliertes Gerät | | | |
|  | Ein Gerät der Klasse III ist für die Versorgung durch eine getrennte Sicherheitskleinspannungsquelle (SELV) ausgelegt. Die Spannung von einer SELV-Versorgung ist so niedrig, dass eine Person unter normalen Umständen gefahrlos mit ihr in Berührung kommen kann, ohne das Risiko eines elektrischen Schlags einzugehen. | IEC 60417-5180 | Grafische Symbole für die Verwendung an Geräten, die den Sicherheitsanforderungen der Klasse III gemäß IEC 61140 entsprechen: Schutz gegen elektrischen Schlag – Allgemeine Aspekte für Installation und Ausrüstung. |
| EE Klasse III | | | |
|  | Anwendungsteil von Typ B entsprechend der Norm IEC 60601-1. | IEC 60417-5840 | Medizinische elektrische Geräte – Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale. |
| Anwendungsteil vom Typ B | | IEC 60878 IEC 60601-1 | |
|  | Anwendungsteil vom Typ BF | IEC 60417-5333 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
| Anwendungsteil vom Typ BF | | | |



Legende der gebräuchlichen Symbole

auf der Verpackung und Kennzeichnung von
Medizinprodukten von DeRoyal



| Symbol | Erklärung | Normbezeichnung | Normtitel |
|--|---|--|---|
| | Klassifiziert und bewertet den Schutzgrad des Gehäuses eines elektrischen Gerätes. • Schutz gegen feste Fremdkörper > 12,5 mm; • Schutz gegen Sprühwasser bis 15 Grad gegenüber der Senkrechten | IEC 60529* *(hat keine Referenznummer gemäß 60601-1 [2005] S.645) | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
| IP-Code, internationale Schutzkennzeichnung | | | |
| | Geeignet für gnetresonanztomographi. | ASTM F2503 | Standardverfahren zur Kennzeichnung medizinischer Geräte und anderer Medizinprodukte hinsichtlich ihrer Sicherheit in Magnetresonanzumgebungen. |
| MR-sicher | | | |
| | Bedingt geeignet für gnetresonanztomographie. | ASTM F2503 | Standardverfahren zur Kennzeichnung medizinischer Geräte und anderer Medizinprodukte hinsichtlich ihrer Sicherheit in Magnetresonanzumgebungen. |
| Bedingt MR-sicher | | | |
| | Ungeeignet für gnetresonanztomographie. | ASTM F2503 | Standardverfahren zur Kennzeichnung medizinischer Geräte und anderer Medizinprodukte hinsichtlich ihrer Sicherheit in Magnetresonanzumgebungen. |
| Nicht MR-sicher | | | |
| | Defibrillationssicher. | IEC 60417-5336 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. Anwendungsteil vom Typ CF. |
| Defibrillationssicher | | | |
| | Zeigt an, dass das Teil dem höheren Schutzgrad gegen elektrischen Schlag entsprechend IEC 60601-1 entspricht. | IEC 60601-1 IEC 60878 | Medizinische elektrische Geräte – Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale. |
| EE Typ CF | | | |
| | Hinweis auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). | EN 50419 | Standardverfahren zur Kennzeichnung medizinischer Geräte und anderer Medizinprodukte hinsichtlich ihrer Sicherheit in Magnetresonanzumgebungen. Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. |
| WEEE | | | |
| | Nichtionisierende elektromagnetische Strahlung | IEC 60417 REF 5140 | Standardverfahren zur Kennzeichnung medizinischer Geräte und anderer Medizinprodukte hinsichtlich ihrer Sicherheit in Magnetresonanzumgebungen. |
| Nichtionisierende Strahlung | | | |
| | Zeigt an, dass die Konstruktionsmaterialien nicht den Phthalat-Weichmacher DEHP enthalten. | BS EN 15986 Anhang B | Symbol zur Verwendung bei der Kennzeichnung von Medizinprodukten - Anforderungen an die Kennzeichnung von phthalathaltigen Medizinprodukten. |
| Enthält kein DEHP | | | |
| | Zeigt an, dass der Artikel ein medizinisches Gerät ist. | ISO 15223 – 1, Punkt 5.7.7 | Medizinprodukte - Symbole, die zusammen mit den vom Hersteller bereitzustellenden Informationen zu verwenden sind - Teil 1: Allgemeine Anforderungen. |
| Medizinprodukte | | | |
| | Zeigt ein einfaches Sterilbarriersystem an. | ISO 7000-3707 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
| Einfaches Sterilbarriersystem | | | |








Legende der gebräuchlichen Symbole

auf der Verpackung und Kennzeichnung von
Medizinprodukten von DeRoyal



Seite 7

| Symbol | Erklärung | Normbezeichnung | Normtitel |
|--|--|-----------------|---|
|  Doppeltes Sterilbarriersystem | Zeigt zwei Sterilbarriersysteme an. | ISO 7000-3704 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
|  Einfaches Sterilbarriersystem mit Schutzverpackung innen | Zeigt ein einfaches Sterilbarriersystem an mit Schutzverpackung innen. | ISO 7000-3708 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
|  Einfaches Sterilbarriersystem mit Schutzverpackung außen | Zeigt ein einfaches Sterilbarriersystem an mit Schutzverpackung außen. | ISO 7000-3709 | Grafische Symbole zur Verwendung auf Geräten. |
|  Benchmark-Produktzertifizierung | Das Benchmark-Zeichen ist ein eingetragenes Zertifizierungszeichen, im Besitz und betrieben von BSI. | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar |
|  Anerkennungszeichen für die Akkreditierung | In Übereinstimmung mit den AS/NZS-Anforderungen (Australien/Neuseeland) | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar |